



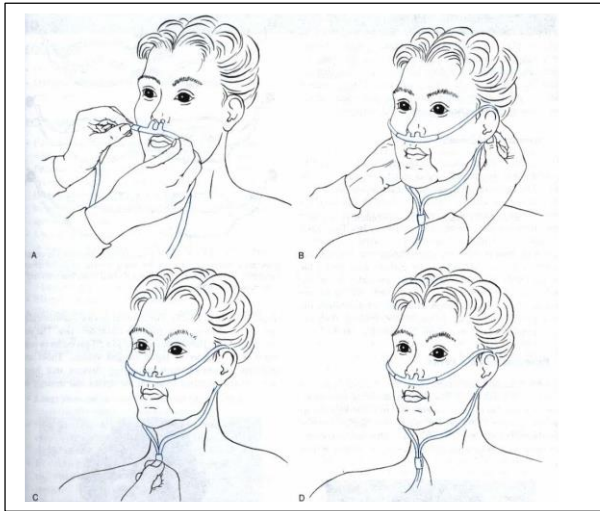

میزان تنظیم جریان اکسیژن (O2 Flow Rate)	درصد اکسیژن دمی (FIO2)
۲ لیتر در دقیقه	۲۴-۴۸ %
۳ لیتر دقیقه	۲۸-۳۲ %
۵ لیتر در دقیقه	۳۶-۴۰ %
۶ لیتر در دقیقه	۴۰-۴۴ %

بنابراین در استفاده از کانولای بینی حداقل جریان اکسیژن تنظیم شده ۲ و حداکثر میزان ۶ لیتر در دقیقه می باشد.

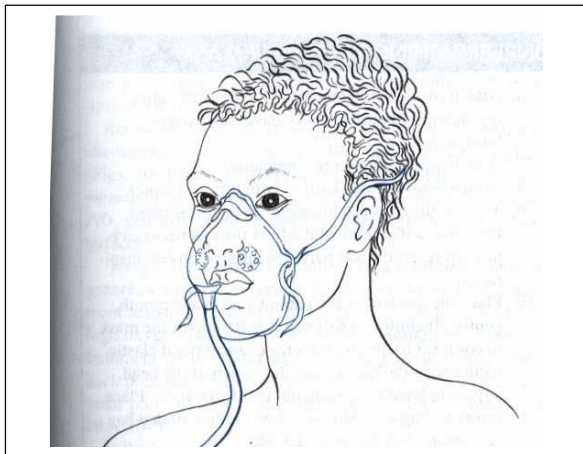

میزان تنظیم جریان اکسیژن (O2 Flow Rate)	درصد اکسیژن دمی (FIO2)
۵ لیتر در دقیقه	۴۰ %
۶ لیتر دقیقه	۴۵-۵۰ %
۸ لیتر در دقیقه	۵۵-۶۰ %

بنابراین در استفاده از ماسک ساده حداقل جریان اکسیژن تنظیم شده ۵ و حداکثر میزان ۸ لیتر در دقیقه می باشد.

اشتباهات رایج در اکسیژن تراپی:

- لوله اکسیژن از قسمت اتصال به ماسک جدا شده و ماسک بدون لوله در روی صورت باقی مانده است و در واقع بیمار اکسیژن نمی گیرد.
- لوله اکسیژن از قسمت اتصال به کپسول جدا شده و یا از ابتدا وصل نشده است.
- توجه: در صورتیکه نوع وسیله اکسیژن رسانی را تغییر داده اید بایستی وسیله قبلی را به طور کامل از بالین بیمار کنار بگذارید تا در اتصالات به اکسیژن اشتباهی رخ ندهد.
- وسیله بدون باز کردن شیر اکسیژن به بیمار متصل شده است.
- میزان اکسیژن باقی مانده در کپسول چک نشده است.
- شیراکسیژن پس از اتمام اکسیژن تراپی بازمانده است.
- بدون توجه به وضعیت COPD بیمار غلظت بالای اکسیژن به وی داده شده و یا از ماسک ساده استفاده شده است.